


● 酸素濃縮器の日常のお手入れ

チェック 酸素濃縮器の使用前、使用後に確認して下さい。**洗 浄** 週に1回以上、必ず行って下さい。

フィルター


チェック 掃除機でほこりを吸い取って下さい。

洗 浄 中性洗剤で洗い、水道水でよくすすいだ後、陰干しにしてよく乾燥させて下さい。

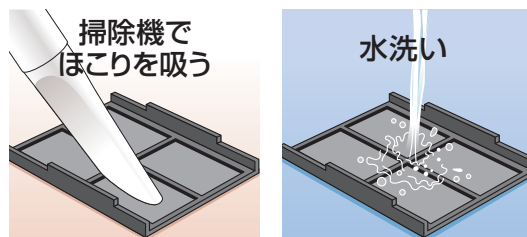

カニューラ

チェック 鼻に直接装着する部分は特に汚れがたまりやすい為、こまめに洗いましょう。

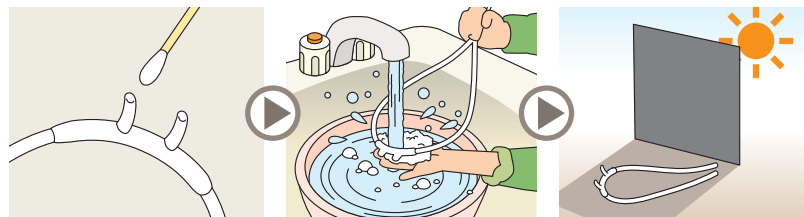

加湿器 オプション

必ず精製水を使用し、加湿器の「上の水位」まで入れて下さい（精製水は薬局で購入できます）。

チェック 精製水が「下の水位」より少なくなったら補充して下さい。

洗 浄 加湿器を水洗いし、精製水を交換して下さい。

注意 加湿器のフタをまわしてしっかりと閉めます。機器本体取り付け位置に2本の穴をあわせ、キャップ部を少し強めに押し込みます（押し込んだ後、加湿器を引き、確実に接続された事を確認して下さい）。



酸素濃縮器についてのお問合せ

備品の購入や機器のトラブルなど、お問合せは以下にご連絡下さい。
お問合せの際は、お名前・ご利用の機器名・かかりつけ医療機関名・取扱業者名などを必ずお伝え下さい。

製造販売業者
ダイキン工業株式会社

販売業者
フィリップス・レスピロニクス合同会社
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-6
マーケティング部 03-5209-8322
www.philips-respironics.jp

● かかりつけ医療機関名

■ 機器のトラブルは...24時間対応、安心の技術サポート

平日9:00~18:00 地域営業所・出張所・駐在

夜間・土日受付 営業所・出張所・駐在の対応日・対応時間外 受付

機器安全センター ☎ 0120-633-881

酸素濃縮器(LiteTEC-3X)の使い方

※本書は取扱説明書にかわるものではありません。必ず正式な取扱説明書をご覧ください。

認証番号:220AHBZX00016000

■ ご使用の際には以下の事にご注意下さい。

- ・ 停電用に携帯用のボンベを用意しておきましょう。
- ・ 酸素濃縮器は換気のよい所に置くようにしましょう。
- ・ 定期的にフィルターを掃除しましょう。

■ 酸素はおくすり! 医師の処方量を必ず守りましょう。

酸素をきちんと吸うことで、心臓の他、あなたの臓器が、守られます。酸素はおくすりと同じで、体に必要な量をおぎなう為に処方されています。しかし「息切れ」は必ずしも酸素不足だけが原因で起こるものではありません。


「息切れ」が強いからといって勝手に酸素流量を変えてはいけません。




3L器 酸素濃縮装置
ライトテック-3X

! 火気からは2m以上離れてご使用下さい。



酸素自体が爆発したり、燃えたりはしませんが、燃えているものをさらに燃えやすくする性質があります。

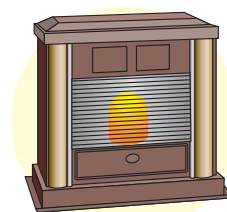


ストーブ

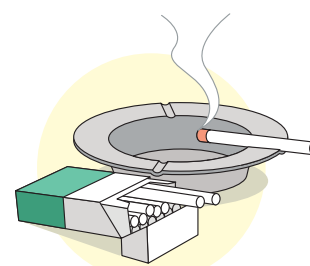

たばこ

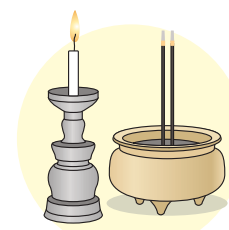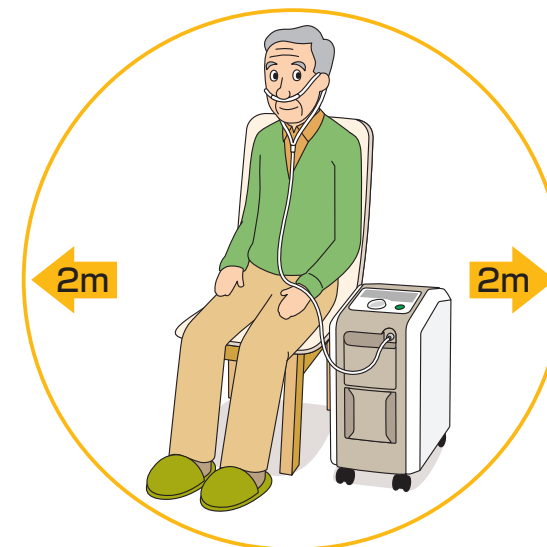

仏壇のろうソク、線香

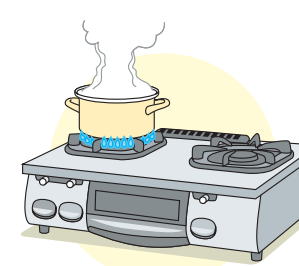

ガスコンロ

とくに、たばこは厳禁!

酸素吸入しながらたばこを吸うことは、健康面からも絶対にやめましょう。カニューラに引火することもあり、大変危険です。

● 酸素濃縮器の使い方

1

電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。

注意 たこ足配線（ほかの機器との併用）はやめましょう。



2

電源ボタンを押して下さい。



3

流量ツマミを回し、指示された流量を正しくセットして下さい。


確認 流量の表示窓の中央に合わせて下さい。



4

鼻カニューラを装着し、酸素吸入をはじめて下さい。

確認 酸素が流れていない?と思ったらカニューラの鼻につける部分をコップの水に入れ、気泡（ブクブク）が出ていれば正常です。

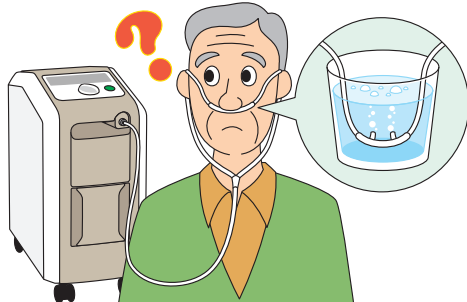

5

使用していないときは電源ボタンを押して電源を切して下さい。



確認 医師の処方による所定時間の吸入して下さい。



● カニューラの使い方


1

カニューラの方を確認し、鼻孔に装着します。

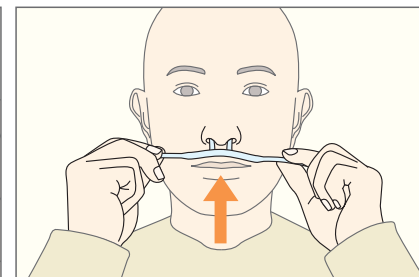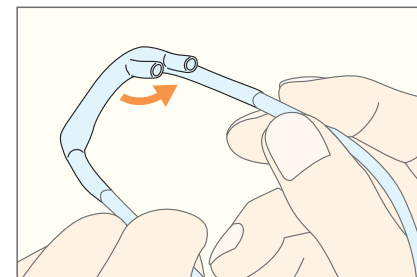


2

左右の耳にカニューラをかけます。

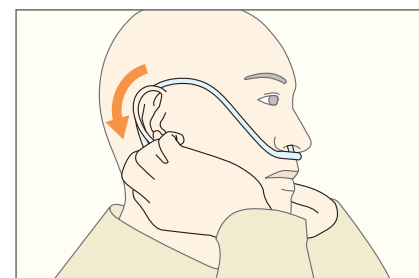


3

ストッパーを上げます。

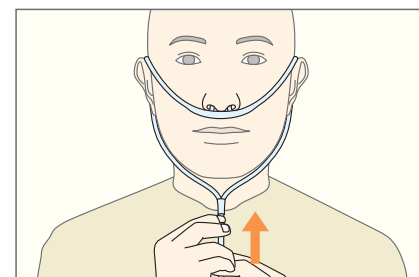

! 使用前に必ずチューブの点検を行って下さい。

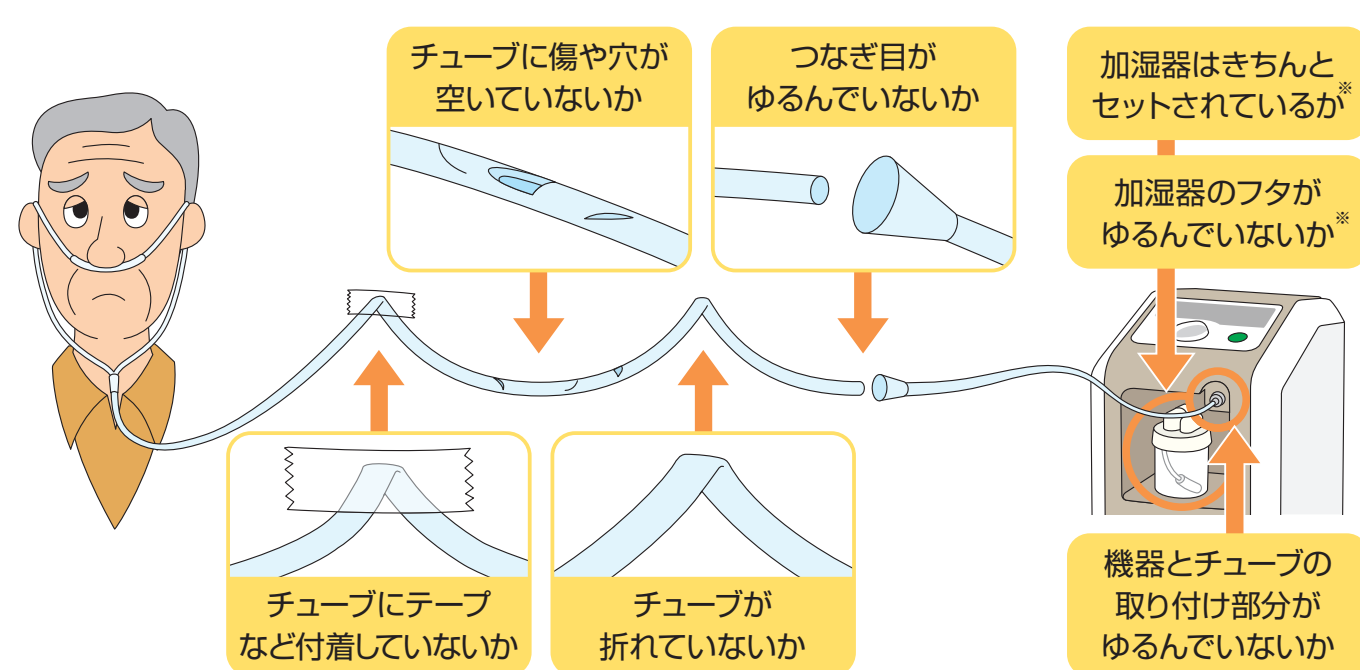

※医師から加湿器の使用について指示がある方のみ対象となります。